

CLEVER CHOICE mini


Sistema de control de glucosa en sangre



Guía de inicio rápido para el usuario


Estimado propietario del sistema CLEVER CHOICE mini:

Gracias por elegir el sistema de monitoreo de glucosa en sangre CLEVER CHOICE mini para tomar el control de su diabetes. CLEVER CHOICE mini le ayudará a mantener un registro de sus niveles de glucosa en sangre. La Guía de inicio rápido del usuario le ayudará en la programación del sistema y en la comprobación de sus niveles de glucosa en la sangre. Por favor, léalo cuidadosamente antes de usar el equipo. Para obtener información completa sobre el sistema de uso y sus características, por favor consulte el Manual del Propietario.

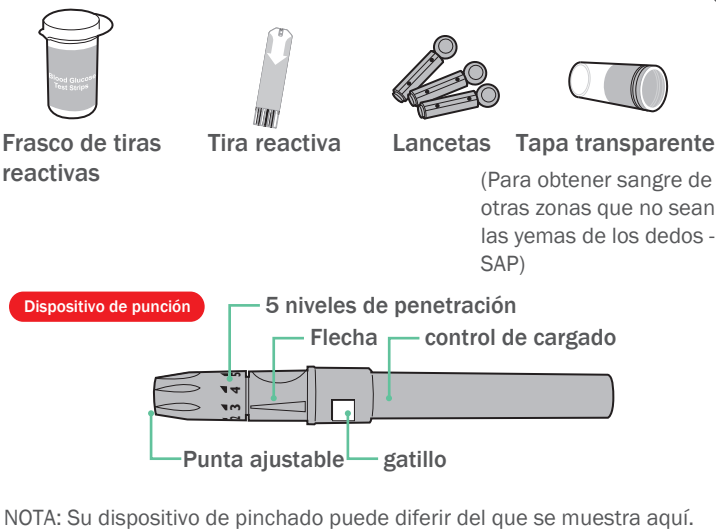

NOTA: Su dispositivo de pinchado puede diferir del que se muestra aquí.

Vista Frontal del Medidor

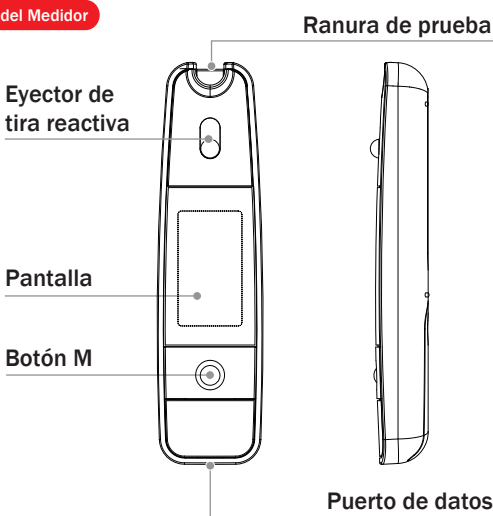


Vista Perfil del Medidor




1. Configuración del medidor

1.1

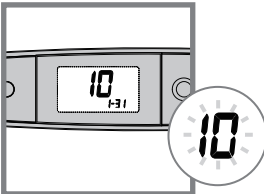


Presione SET para comenzar a configurar.

1.2

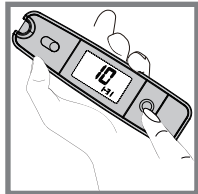

Presione M para cambiar los valores. Mantenga presionado M para aumentar el número más rápido. Presione SET para pasar al siguiente paso.

1.3

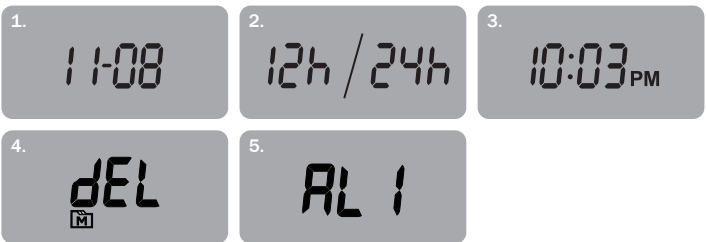


El día parpadea. Siga los pasos 1.2 para hacer cambios. La secuencia de configuración después del día es la siguiente:

- (1) La fecha
- (2) 12h/ 24h
- (3) Hora
- (4) Borrado de la memoria
- (5) Función de la alarma

El medidor se apagará automáticamente cuando la configuración haya concluido. Para el borrado de la memoria, por favor revise el Manual del usuario.


2. Configuración del dispositivo de pinchado

2.1

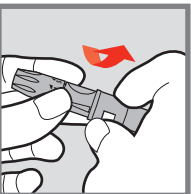


Remueva la tapa del Dispositivo.

2.2

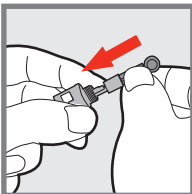


Inserte firmemente una lanceta dentro del sujetado Hasta colocarla correctamente.

2.3

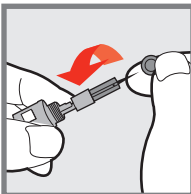


Remueve el protector.

2.4

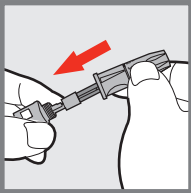


Reemplace la tapa del dispositivo de pinchado. Para SAP, utilice la tapa transparente.

2.5

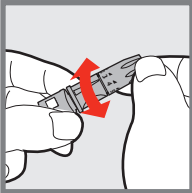

Seleccione la profundidad de penetración. Se requiere 1-2 para piel suave, 3 para piel normal, 4-5 para piel gruesa o callosa.

2.6

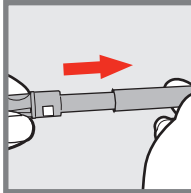

Gire el control de cargado hasta que haga clic. Aparte para uso posterior.


3. Para medir su glucosa en sangre

3.1




Rompa el sello de seguridad (sello de garantía) al usar el frasco por primera vez escriba la fecha en el sello.

3.2

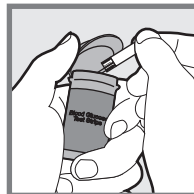


Lávese y séquese las manos correctamente. Saque una tira Y cierre el frasco herméticamente.

3.3

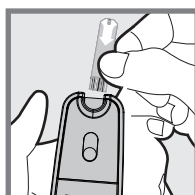

Inserte una tira para encender el medidor. La secuencia en la pantalla es "CHK" y " " → Parpadeara " " con la fecha y la hora.


3.4

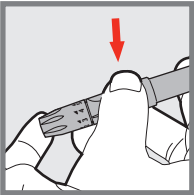

Tome el dispositivo de pinchado pre-establecido. Sujételo firmemente contra el Lugar de pinchado. Presione el gatillo para obtener una gota de sangre.


3. Para medir su glucosa en sangre

3.5

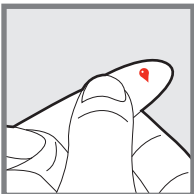


Suavemente exprima alrededor del área pinchada para obtener sangre suficiente.

3.6

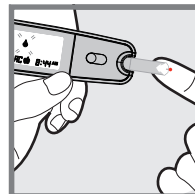


Mientras " " parpadea en la pantalla, acerque el hoyo absorbente de la tira de prueba a la gota de sangre hasta que este se llene de sangre completamente.

3.7

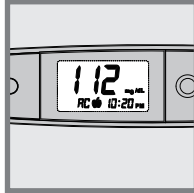

Después que el medidor cuente hasta 0, sus Resultados aparecerán junto a la fecha y la hora y serán automáticamente guardados en la memoria.

3.8

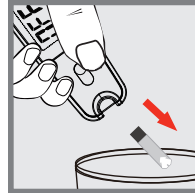

Expulse la tira de pruebas. la tira y la lanceta con cuidado.

Para una prueba con solución de control, por favor consulte el Manual del propietario para información más detallada.

4. Lea sus resultado

Su resultado de la glucosa aparecera con los siguientes mensajes:

Lo	KETONE?	Hi
Aparece cuando la glucosa < 20 mg/dL (1.1mmol/L)	Aparece cuando la glucosa es ≥ 240 mg/dL (13.3 mmol/L)	Aparece cuando la glucosa es > 600 mg/dL (33.3mmol/L)

Valores de Referencia:

Hora del día	Rango normal de plasma glucosa para no diabético
En ayuno y antes de comidas	Menos de 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
2 horas después de comidas	Menos de 140 mg/dL (7.8 mmol/L)

Fuente: American Diabetes Asociacion (2008). Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care, 31 (Supplement 1): S1-108.

Por favor trabaje con su médico para determinar los rangos objetivos que trabajen mejor para usted.

Distribuido por
Simple Diagnostics
P.O. Box 128, Williston Park, NY 11596 USA
24-HOUR TOLL-FREE TELEPHONE ASSISTANCE
1-877-DIABETK 1-877-342-2385
www.SimpleDiagnostics.com

Para uso invitro solamente
Lea las instrucciones antes de su uso
Para pruebas personales
315-4265100-001

Si su dispositivo de pinchado difiere del mostrado aquí, por favor diríjase al manual de manufactura para asegurar el uso correcto del mismo.